





**WORK INSTRUCTION
OPERATIONAL MACHINE AUTO CLAVE
UNTUK STERILISASI SEPATU/BAJU
LOUNDRY ASEPTIK 4**

Halaman	:	2 dari 4
No. Dokumen	:	WI/D-6/QA/024
Tanggal	:	26 APR 2021
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

- 07.01.02. Pastikan tape indikator sterilisasi terpasang dengan baik untuk seal tutup *hoggy paper* dan tape indikator yang digunakan adalah tape indikator baru (pemakaian tape indikator maksimal 1x pemakaian) serta diberikan penandaan berupa tanggal untuk menghindari pemakaian tape indikator berulang.

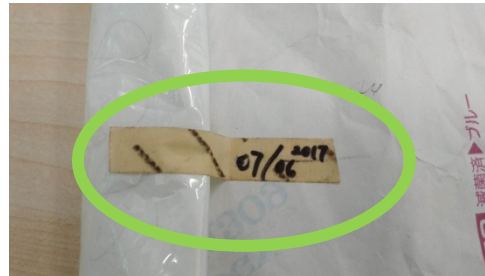

- 07.01.03. Siapkan air RO, dengan mengambil di ruang IPC.
07.01.04. Isi air RO ke dalam tabung mesin *Autoclave* sampai batas minimal yang telah di tentukan (air pas di plat tengah lubang).

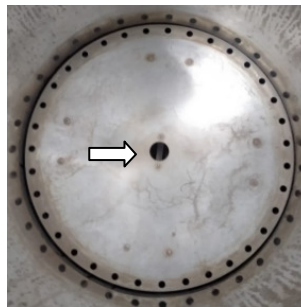

07.02. Proses Auto Clave

- 07.02.01. Masukkan baju atau sepatu ke dalam keranjang mesin *autoclave* satu persatu.



- 07.02.02. Setelah semua baju atau sepatu yang ingin di *autoclave* masuk ke dalam tabung, tutup tabung dan, kunci tutup *autoclave* dan *close* keran *exhaust*.



Tutup tabung



Kunci tabung



Putar ke arah kanan (*close*)

ASLI.

Otsuka

PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Quality
Assurance

**WORK INSTRUCTION
OPERATIONAL MACHINE AUTO CLAVE
UNTUK STERILISASI SEPATU/BAJU
LOUNDRY ASEPTIK 4**


Halaman	:	3 dari 4
No. Dokumen	:	WI/D-6/QA/024
Tanggal	:	26 APR 2021
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

COPY 05

07.02.03. Turn ON mesin, setting suhu ke 121°C selama 15 menit, pilih mode Solid dan tekan Start.



07.02.04. Setelah proses *autoclave* selesai ditandai dengan indikator di tanda *Complete*, putar keran *exhaust* ke *open* agar mesin *autoclave* cepat dingin.

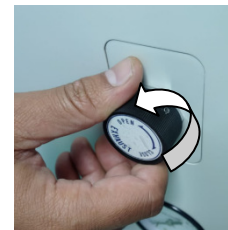

Indikator menunjukan comp. saat proses selesai

Putar exhaust ke kiri (*Open*)

07.02.05. Buka kunci tabung kemudian keluarkan Sepatu atau Baju yang sudah selesai diautoclave bertahap satu persatu, cek *tape indikator steril* apakah sudah berubah warna, apabila belum, berarti pengerjaan harus diulangi kembali dari awal. Apabila sudah berubah warna, pindahkan ke dalam mesin Oven untuk di lakukan proses pengeringan,



Unlock tutup tabung



Buka tutup tabung



Keringkan pada oven

07.02.06. Proses Seterilisasi Sepatu atau Baju dengan metode *Auto Clave* telah selesai, lakukan dengan cara yang sama untuk sepatu atau baju yang lainnya.

ASLI.

Otsuka

PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Quality
Assurance

**WORK INSTRUCTION
OPERATIONAL MACHINE AUTO CLAVE
UNTUK STERILISASI SEPATU/BAJU
LOUNDRY ASEPTIK 4**

Halaman	:	4 dari 4
No. Dokumen	:	WI/D-6/QA/024
Tanggal	:	26 APR 2021
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

COPY 05**08 CATATAN MUTU**

-

09 DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

09.02. Departemen QA

10 DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

-